

PHYSIOUS

中低频组合电刺激器FS-250 / FS-350



OG Wellness

低频、干扰电和中频，
全部集成到一个“3合1”电疗仪中

“组合模式”包含多种模式，
能够带给患者前所未有的刺激体检。



设置所选通道的输出数据

可以通过位于面板上的旋钮来调节所选通道的输出数据。



通过颜色区分各个通道，
目的是减少用户出错的可能性

电极和通道选择按钮采用了相同的颜色，这样就极大地降低了用户出错的可能性。



FS-350

FS-250



较大的电极托盘

在控制面板的前侧有一个较大的托盘，便于轻松地存放电极。


*对于FS-250型而言，最多可存储8个抽吸电极（L）。

*对于FS-350型而言，最多可存储12个抽吸电极（L）。



低频模式

通过低频脉冲电刺激对患者进行治疗。

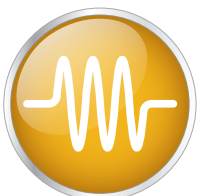

中频模式

通过中频间歇电刺激对患者进行治疗，适用于肌肉刺激。



干扰电模式

以中频电流的方式进入患者体内，在患者体内干扰出一个低频，用这个低频电流进行治疗。



组合模式

为了更好地提升治疗效果、避免患者对电刺激产生耐受性，通过组合中频、低频、干扰电各种方式进行治疗，优化电刺激的效果。

多种多样的电极

多种多样的电极可以提供各种各样治疗方法，从而满足不同患者的需求。我们提供多样性的电极，满足各种治疗形式和目标群体选择之需。



6
通道型

PHYSIOUS FS-350

最多可达12个通道
(干扰电和组合模式：6通道)



4
通道型

PHYSIOUS FS-250

最多可达8个通道
(干扰电和组合模式：4通道)

	FS-350-S1	FS-350-S2
抽吸电极 (L)		
抽吸电极 (M)	● 24件	
抽吸电极 (S)		
抽吸电极 (平板式) (XS)		● 24件
橡胶电极 (S)		
加热袋电极		
温热橡胶电极		● 2件 *1
治疗区域	宽	窄
应用		点穴刺激热反应

*1 绑带 (L) , (S) 是标准配件。

	FS-250-S1	FS-250-S2	FS-250-S3
抽吸电极 (L)			
抽吸电极 (M)	● 8件	● 16件	
抽吸电极 (S)			
抽吸电极 (平板式) (XS)			● 16件
橡胶电极 (S)			
加热袋电极			
温热橡胶电极			● 1件 *1
治疗区域	宽	宽	窄
应用			点穴刺激热反应

*1 绑带 (L) , (S) 是标准配件。

可选配件




抽吸电极 (L)
ELR-701



抽吸电极 (M)
ELR-702



抽吸电极 (S)
ELR-703

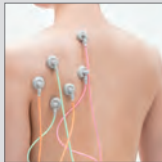


抽吸电极 (平板式) (XS)
ELR-704
抽吸电极 (尖峰型) (XS)
ELR-705



2极抽吸电极
ELR-706



橡胶电极 (S)
ELR-101

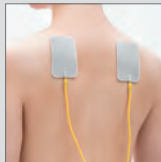

橡胶电极 (L)
ELR-102



2极橡胶电极
ELR-107



温热橡胶电极
ELR-521
*绑带为可选件。



加热袋电极
ELR-519
*绑带为可选件。

规格		
产品名称	中低频组合电刺激器FS-250 / FS-350	
型号	FS-250	FS-350
外形尺寸	480 (W) × 535 (D) × 1300 (H) mm	580 (W) × 535 (D) × 1300 (H) mm
重量	27千克	28千克
耗电功率	240 VA	320 VA
通道	8个通道	12个通道
输出波形	正弦波：干扰电，中频 双向对称波：低频	
最大输出电流	45 mArms (负载为500 Ω)	
最大输出电压	65 Vrms (负载为10 kΩ)	
输出频率	基频	2 kHz到10 kHz：干扰电 1 kHz到11 kHz：中频 50 Hz、100 Hz、1 kHz：低频
	治疗频率	0 Hz到600 Hz：干扰电 0 Hz到120 Hz：中频 2 Hz到60 Hz：低频
治疗模式	组合模式、干扰电模式、中频模式、低频模式	
治疗方式	I、II、III	
治疗时间	1到30分钟 (可以为1至99分钟,可自行选择)	
负压抽吸力	最小：1、2、3、4、5；最大：7级，波形	
加热器	开/关	
安全功能	过电流保护，自动回零启动	

可选配件



① 抽吸电极 (L)	E L R-701：1个	⑤ 海绵电极 (L)	E L R-515：1包 (包括4件)
② 抽吸电极 (M)	E L R-702：1个	⑥ 海绵电极 (M)	E L R-516：1包 (包括4件)
③ 抽吸电极 (S)	E L R-703：1个	⑦ 海绵电极 (S)	E L R-517：1包 (包括4件)
④ 抽吸电极线 (L)、(M)、(S)		⑧ 抽吸电极 (平板式) (XS)	E L R-704：1个
(红色)	E L R-707：1条	⑨ 抽吸电极 (尖峰型) (XS)	E L R-705：1个
(绿色)	E L R-708：1条	⑩ 抽吸电极线 (XS)	
(橙色)	E L R-709：1条	(红色)	E L R-713：1条
(蓝色)	E L R-710：1条	(绿色)	E L R-714：1条
(黄色)	E L R-711：1条	(橙色)	E L R-715：1条
(紫色)	E L R-712：1条	(蓝色)	E L R-716：1条

⑩ 吸力电极线 (XS)	
(黄色)	E L R-717：1条
(紫色)	E L R-718：1条
⑪ 2极抽吸电极	E L R-706：1个
⑫ 2极海绵电极	E L R-368：1包 (4片)
⑬ 2极抽吸电极一次性纸电极	E L R-363：1包 (500片)
⑭ 2极抽吸电极海绵固定环	E L R-369：1包 (4片)
⑮ 橡胶电极 (L)	E L R-102：1片
⑯ 橡胶电极 (S)	E L R-101：1片
⑰ 2极橡胶电极	E L R-107：1个
⑱ 2极标准电极盖	E L R-513：1个
⑲ 2极标准电极海绵	E L R-514：1片
⑳ 双面胶片 (L)	E L R-105：1包 (24片)
㉑ 双面胶片 (S)	E L R-104：1包 (24片)
㉒ 橡胶电极线 (黄色)	E L R-719：1条
㉓ 橡胶电极线 (紫色)	E L R-720：1条
㉔ 加热袋电极	E L R-519：1个
㉕ 加热袋电极海绵	E L R-502：1片
㉖ 温热橡胶电极	E L R-521：1个
㉗ 温热橡胶电极海绵	E L R-522：1片
㉘ 绑带 (L)	E L R-503：1条
㉙ 绑带 (S)	E L R-504：1条
㉚ 电缆扎带	E L R-518：1包 (包括10件)
㉛ 水瓶	E L R-510：1件

生产 商

进 口 商

奥绩技研有限公司 邑久工厂
日本冈山县瀬户内市邑久町向山 77 邮编：701-4233
上海奥绩医疗器械有限公司
上海市长宁区遵义路 150 号
虹桥南丰城三期 702 单元 773 室 邮编：200051

经 销 商